

Flex:trial guide de démarrage rapide



Flex:trial est le premier système d'aides auditives à vous offrir la flexibilité de faire des appareillages d'essais de manière simple et sans risque.


Les aides auditives Flex:trial ont une structure produit flexible vous permettant de télécharger différents niveaux de technologie et différentes fonctions dans le / les même(s) appareil(s) grâce à l'utilisation du logiciel d'Unitron, TrueFit.™

Une solution unique et facile qui vous permet de proposer à vos clients un essai sans risque au niveau de technologie nécessaire.

Programmer les aides auditives Flex:trial

Etape 1 : Détection des appareils


- Connectez les appareils au logiciel d'appareillage d'Unitron TrueFit en utilisant l'interface de programmation souhaitée (iCube, NOAHLINK ou HI-PRO).
- Cliquez sur le bouton **Détecter**.
- Une fenêtre vous indiquera que vos aides auditives ont été détectées avec succès.

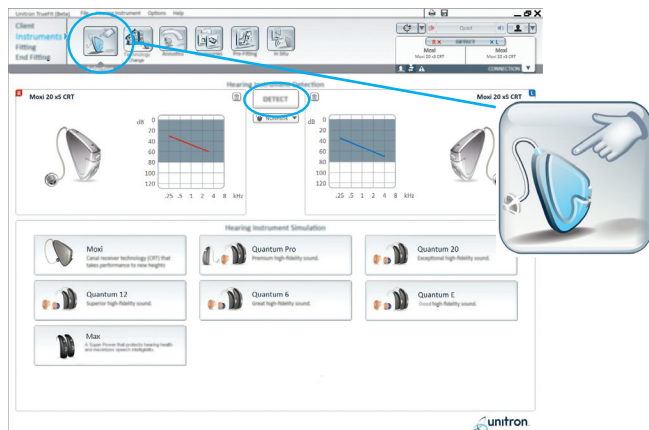

Etape 2 : Sélection et téléchargement du niveau de technologie


- Une fois que l'aide auditive a été détectée, allez sur l'écran **Appareils Auditifs > Changer la technologie**.
- Le niveau actuel de technologie de l'aide auditive apparaît sur l'écran avec tous les autres niveaux de technologie disponibles pour ce produit.
- Cliquez sur le bouton pour sélectionner le niveau de technologie souhaité afin de lancer l'assistant de changement de technologie.

Depuis l'écran **Appareils Auditifs > Changer la technologie** cliquez sur **Détecter**

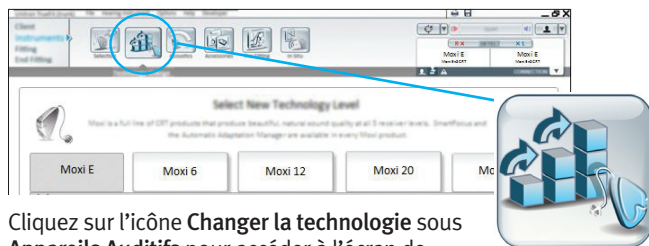


Cliquez sur l'icône **Changer la technologie** sous **Appareils Auditifs** pour accéder à l'écran de changement de technologie

L'assistant va vous guider à travers les étapes pour changer le niveau de technologie de l'aide auditive. Pendant cette procédure, vous aurez le choix d'utiliser les réglages existants comme point de départ ou d'en créer de nouveaux.

 **Note :** assurez-vous bien d'avoir retiré les aides auditives des oreilles de votre patient avant de commencer cette procédure.

Etape 3 : Réglage de l'aide auditive


- Utilisez votre procédure de réglage habituelle.

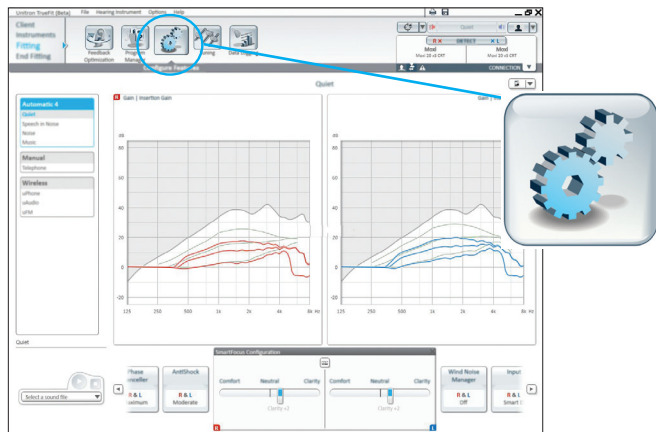

Faites les réglages en utilisant les écrans **Appareillage** > **Configuration des fonctions** ou **Ajustement**


Etape 4 : Sauvegarde des réglages et démarrage de la phase d'essai

- Vous pouvez définir la durée de la phase de test dans l'écran **Fin d'appareillage** > **Bips**.
- Après avoir sauvegardé les réglages, l'aide auditive est prête pour la phase d'essai.

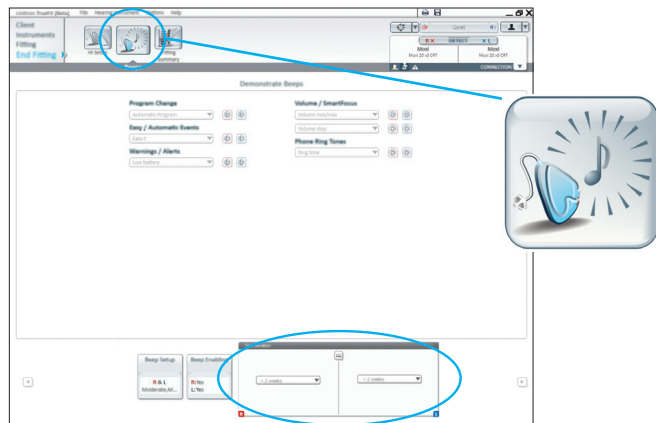



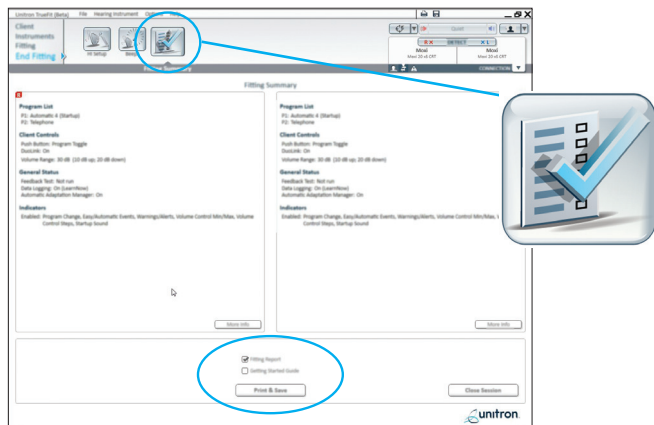


Fixez la durée de la période d'essai depuis l'écran **Fin d'appareillage** > **Bips**

- L' aide auditive émettra un bip répété lorsque la période d'essai prendra fin. Le bip répété est destiné à rendre l'appareil inutilisable et ne peut être désactivé qu'en procédant à une reconnexion au logiciel d'appareillage.
- Imprimez le guide de démarrage pour vos clients.



Imprimez le guide de démarrage depuis l'écran **Fin d'appareillage** > **Résumé d'appareillage**

-  **Note :** l'aide auditive peut être programmée sur n'importe quel niveau de technologie dans chaque tranche de période d'essai.
-  **Note :** vous pouvez transférer un réglage sur / à partir d'une aide auditive Flex:trial en vous aidant de l'assistant de Transfert sous Appareils Auditifs > Transfert de réglages.
-  **Note :** si vous avez des questions sur une aide auditive Flex:trial, merci de contacter votre distributeur.
-  **Les aides auditives Flex:trial doivent être nettoyées et désinfectées avant d'être réutilisées. Les consommables (dômes, tubes fins etc...) doivent être remplacés.**
-  **N'oubliez pas de reprendre les informations de sécurité avec votre client et de lui remettre un guide utilisateur des produits Unitron. Des guides utilisateurs additionnels peuvent être obtenus en contactant votre distributeur.**

Contactez nous

Australia - 1800 212 313

Belgium - +32 (0) 2 468 19 81

Canada - 1 800 265 8255

China - 512 6258 2258

Colombia - 57 1214 9847

Denmark - +45 3832 1229

European Representative &

Germany - +49 711 658538 0

France - 0821 02 9000

India - +91-22-26871151

International - +1 519 895 0100

Netherlands - +31 88 600 88 10

New Zealand - 0800 864 8766

Norway - +47 23 00 32 70

Russia - +7 495 788 02

South Africa - (011) 467 7662/52

South Korea - +82 10 3414 8366

Spain - +34 902 494 960

Sweden - +46 (0) 8 546 20 960

Switzerland - 0800 928 801

U.K. - 01925 247810

U.S. - 1 800 888 8882

Chez Unitron, nous sommes profondément dévoués aux personnes concernées par une perte auditive. Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels de l'audition pour développer des solutions qui améliorent la vie de manière significative. Parce que l'audition est essentielle.

unitron.com/fr



20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

CE
0543